


REVYLINE

RL 035 Kids

Детская электрическая звуковая зубная щетка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

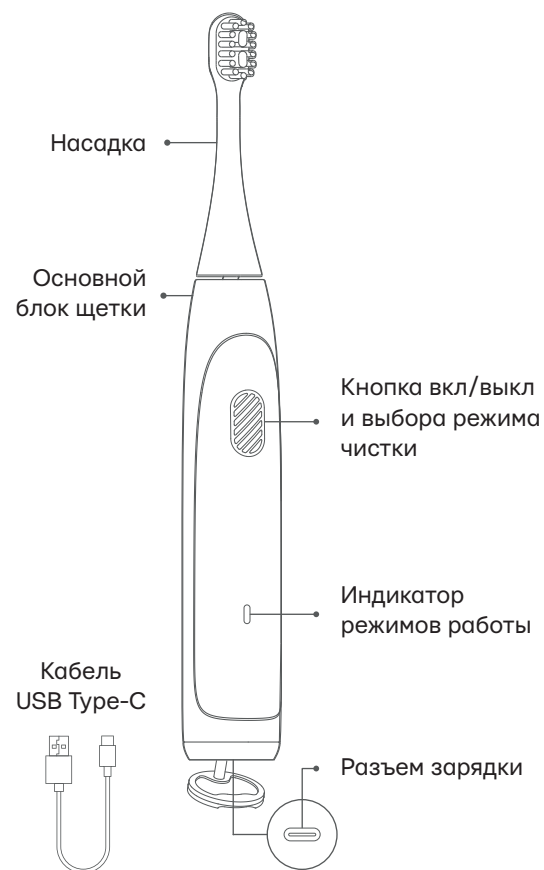

Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

Меры предосторожности

Перед первым применением электрической щетки RL 035 Kids внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте щетку во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
10. Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Электрическую зубную щетку Revyline RL 035 не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.

13. Детям до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.
14. Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
15. Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.
16. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей, в сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже -7°C и не выше $+40^{\circ}\text{C}$.
17. Утилизация прибора и встроенного аккумулятора должна осуществляться в соответствии с общепринятыми правилами.

Предупреждения медицинского характера

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Зарядка аккумулятора

- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, который вставляется в разъем на корпусе щетки.
- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор щетки. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.
- Во время зарядки аккумулятора индикатор мигает. Если при зарядке индикатор перестает мигать, значит батарея полностью заряжена.
- Если батарея разряжена, то во время использования индикатор батареи мигает в течение нескольких секунд, а затем отключается.
- Щетка работает до 40 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.)

Включение прибора

Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить щетку.

Выбор необходимого режима осуществляется последовательным нажатием кнопки вкл/выкл.



Любой последний выбранный режим сохраняется в памяти и при последующем использовании щетки включается в первую очередь.

После последовательного переключения всех режимов нажмите кнопку вкл/выкл еще раз, чтобы выключить щетку.

Автоматическое отключение питания происходит через 2 минуты работы прибора.

Выбор режима чистки

Электрическая зубная щетка RL 035 Kids позволяет использовать 3 режима работы:

Soft. При выборе мягкой чистки индикатор загорается синим цветом. Режим подходит в период привыкания к звуковой щетке или если у вашего ребенка чувствительные зубы.

Daily clean. В режиме «Ежедневная чистка» индикатор горит зеленым. Это самый оптимальный режим для проведения качественной гигиены полости рта утром и вечером.

Whitening. На режиме «Отбеливание» включается голубая подсветка индикатора. Используется такой режим для тщательной полировки эмали.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации зубной щетки RL 035 Kids одна стандартная сменная насадка.

Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.


Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.



Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.


Прочесс чистки

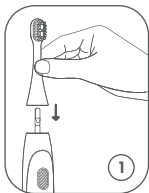

1. Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.



2. Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

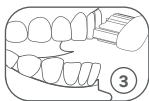

3. Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая возвратно-вращательные движения.

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно. Поможет в этом 2-минутный таймер, который каждые 30 секунд будет делать короткую паузу, «информируя» таким образом о том, что пора сменить зону чистки. По прошествии двух минут щетка отключится автоматически.

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора

осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие.

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА REVYLINE Модель: RL 035 Kids

Предназначена для эффективной чистки зубов.

Частота колебаний щетинок – 33 000–35 000 в мин.

3 режима работы – Soft, Daily clean, Whitening.

Таймер на 2 минуты, напоминание о смене зоны чистки зубов каждые 30 секунд.

Материал корпуса – ABS-пластик.

Щетина DuPont.

Номинальное напряжение – 3,7 В.

Номинальная мощность – 1,5 Вт.

Питание – литиево-ионный аккумулятор (700 mAh).

Время полной зарядки – 4 ч.

Время работы аккумулятора после полной зарядки – 40 дней.

Влагозащита – IPX7.

Гарантия – 2 года.

Средний срок службы – 5 лет.

Хранить при комнатной температуре.

Комплектация

Основной блок щетки

Сменная насадка – 1 шт.

Кабель USB Type-C

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

☎ 8 (800) 775-38-49

🌐 www.revyline.ru